



RUS

До

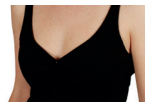

После

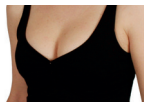


это фантастическое средство для увеличения груди, которая невероятно похожа на естественную и а ощупь.

Изначально этот способ увеличения груди был разработан для звезд кино и телевидения США. Цель была создать такую грудь, которая выглядела бы максимально естественно при приближенной съемке. Никто не должен был знать, что грудь была увеличена, кроме ее обладательницы! состоит из специального силиконового геля, который используется также для изготовления имплантатов. Поскольку Вставками силиконового бюстгалтера подкладывается в бюстгалтер, купальник или верхнюю часть бикини, нет такого риска, который существует при хирургическом вмешательстве. Вставками силиконового бюстгалтера увеличивает Вашу грудь на один размер. Силикон разогревается за считанные секунды. Ваша грудь сразу же приобретает нужную форму. Так как Вставками силиконового бюстгалтера очень естественный на ощупь, Ваши друзья и родственники не почувствуют ничего необычного, когда Вы будете их обнимать.

Инструкция по применению и уходу

Вставками силиконового бюстгалтера поставляется в комплекте по 2 шт. Правый и левый увеличитель груди различны по форме. Длинный прямой край – это верх. Совсем не обязательно покупать новый бюстгалтер. Рекомендуется использовать бюстгалтеры и верхние части купальников с косточками. Когда Вы подкладываете увеличитель в бюстгалтер, зона декольте выглядит более привлекательно и полнота вашей груди увеличивается. Если Вы хотите увеличить грудь, не открывая при этом зону декольте, мы рекомендуем приобрести бюстгалтер на размер больше. Чтобы Ваша грудь выглядела больше, достаточно просто поместить Вставками силиконового бюстгалтера на грудь в бюстгалтере. Чтобы подчеркнуть зону декольте, разместите. Вставками силиконового бюстгалтера глубже и сдвиньте к внешней стороне.

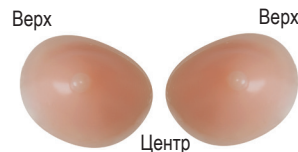

Внимание!

Лосьоны и кремы для загара могут повредить оболочку вкладок.

Перед применением тщательно очистите кожу.

Вставками силиконового бюстгалтера изготовлен из специального силиконового геля, покрытого защитной пленкой из полиуретана. Эта конструкция довольно прочная. Однако, ее следует защищать от контактов с острыми и колющими предметами. Вставками силиконового бюстгалтера нельзя надевать, если оболочка повреждена. Если оболочка из полиуретана повреждена, поврежденное место можно заклеить текстильной клеевой лентой. Чтобы почистить Вставками силиконового бюстгалтера, промойте его водой со слабым мыльным раствором и протрите мягкой салфеткой.

Внимание: берегите Вставками силиконового бюстгалтера от детей. В случае проглатывания силиконового геля немедленно обратитесь к врачу.

Гарантийный срок составляет 24 месяца от момента покупки. Гарантия распространяется на брак материала и качество продукта. В качестве подтверждающего документа используется чек. Гарантия действительна только если соблюдалась инструкция по применению. В случае повреждений в результате неаккуратного обращения с изделием, использования его не по назначению, нарушения инструкции, гарантия не предоставляется. Обслуживание лиц, не уполномоченных на получение данных услуг, не проводится.

Gewährleistung und Service:


Hydas GmbH
c/o atrikom fulfillment GmbH • Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg

Tel.: +49 69 - 95 40 61 13 • Fax: +49 69 - 95 40 61 40
e-Mail: info@hydas.de • http://www.hydas.de

BH-Einlagen

Art.Nr.1530

Hydas
...und es geht mir gut!

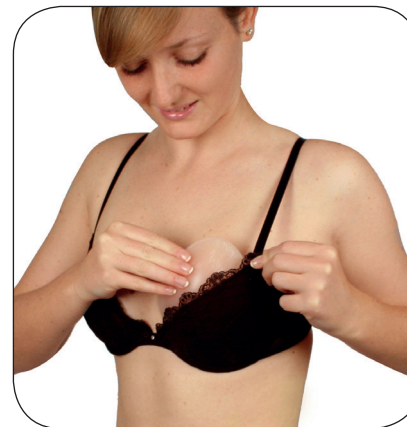

D

Silikon BH-Einlage

GB

Silicone breastforms

F

Le soutien-gorge avec une poitrine en silicone

NL

Silicone BH-inlegstukken

I

Sostegno di silicone per reggiseno

E

Refuerzo de silicona para el sujetador

P

Enchimento de silicone para soutien

S

Silikon bh skär

CZ

Silikonové vložky podprsenka

UA

вставками силиконового бюстгалтера

RUS

вставками силиконового бюстгалтера



Hydas GmbH & Co. KG | Hirzenhainer Straße 3 | 60435 Frankfurt, Germany
Tel.: +49 (0)69 / 95 40 61 0 | Fax: +49 (0)69 / 95 40 61 40 | e-Mail: info@hydas.de
www.hydas.de

1530_GAz_2406

BH Einlagen fühlen sich auch bei Berührung außergewöhnlich echt an.

Ursprünglich wurde diese Form der Brustvergrößerung für die Film- und Fernsehindustrie in den USA entwickelt. Ziel war es, die vergrößerte Brust bei Nahaufnahmen so echt wie möglich erscheinen zu lassen. Niemand außer der Trägerin selbst sollte wissen, daß die Brust vergrößert wurde!

UNSERE BH EINLAGEN werden aus speziellem Silikon-Gel hergestellt, das auch für die Herstellung von Brustimplantaten verwendet wird. Da die Einlagen nur in den BH, Badeanzug oder das Bikini-Oberteil eingelegt wird, gibt es keinerlei Risiken wie bei einem chirurgischen Eingriff. Sie vergrößern ihre Brust um eine BH-Größe. Innerhalb von Sekunden wärmt sich das Silikon auf. Ihre Brust ist sofort "in Form".

Gebruuchsanweisung und Pflegeanleitung

Die BH Einlagen werden paarweise geliefert. Die linke und die rechte Brustvergrößerung ist unterschiedlich geformt. Die lange gerade Kante ist jeweils die Oberseite. Die Einlagen vergrößern die Brust um eine BH-Größe, es ist jedoch nicht unbedingt erforderlich neue BHs zu kaufen. Es wird jedoch empfohlen, BHs, Badeanzüge oder Bikini-Oberteile mit Formbügel zu verwenden. Beim Einlegen in den BH wird das Dekolleté und die Fülle der Brust extrem verstärkt. Wenn Sie die Brust vergrößern wollen, ohne das Dekolleté hervorzuheben ist es sinnvoll, einen um eine Größe größeren BH zu verwenden. Um die Brust größer erscheinen zu lassen genügt es die Einlagen direkt auf der Brust im BH zu platzieren. Um das Dekolleté zu betonen, legen Sie die Einlagen tiefer und etwas mehr auf die Außenseite. Beim Einlegen in den BH werden Sie bei etwas Übung sehr schnell die für Sie optimale Positionierung finden.

Die Einlagen sind aus einem speziellen Silikon-Gel hergestellt und in eine Schutzfolie aus Polyurethan eingeschweißt. Diese Verarbeitung ist sehr haltbar, sie sind jedoch von spitzen und scharfen Gegenständen fernzuhalten. Die Einlagen sollten nicht getragen werden, wenn die Folie beschädigt ist. Sollte die Folie aus Polyurethan beschädigt werden, kann die beschädigte Stelle mit einem Textilklebeband geschlossen werden.

Achtung!


Lotionen oder Bräunungsmittel können die Folie der BH-Einlagen schädigen. Die Haut vor der Anwendung sorgfältig reinigen. Dafür mit Wasser und milder Seife abwaschen und anschließend mit einem weichen Tuch trockenreiben.

Achtung!



Die Einlagen sollten von Kindern ferngehalten werden. Wenn Silikon-Gel verschluckt wurde bitte sofort einen Arzt konsultieren.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum auf Herstellungsfehler in Material und Qualität. Als Nachweis dient der Kaufbeleg. Diese Gewährleistung ist nur gültig, wenn die Hinweise der Gebrauchsanweisung beachtet werden. Bei Schäden durch Gewaltanwendung, Missbrauch und unsachgemäßer Anwendung oder Service von unberechtigten Personen erlischt die Gewährleistung.

vorher

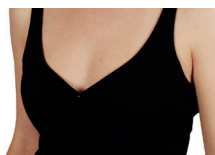


nachher

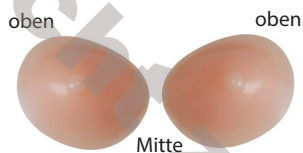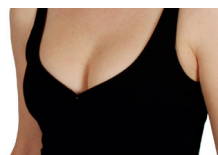


це фантастичний засіб для збільшення грудей, які при дотикові неймовірно скидаються на природні.

До

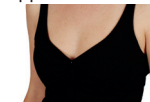

Після

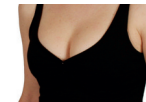

Спочатку цей спосіб збільшення грудей був розроблений для зірок кіно і телебачення США. Метою було створити такі груди, які виглядали б максимально природньо за наближеної зйомки. Ніхто не мав знати (крім їх власниці!), що груди збільшені.

Вставками силіконового бюстгальтера складається із спеціального силіконового гелю, який використовується також для виготовлення імплантатів. Оскільки Вставками силіконового бюстгальтера підкладається в бюстгальтер, купальник або верхню частину бікіні, той ризик, який існує при хірургічному втручанні, відсутній.

Вставками силіконового бюстгальтера збільшує Ваші груди на один розмір. Силікон розігрівається за лічені секунди. Ваші груди одразу ж набувають потрібної форми. Так як Вставками силіконового бюстгальтера дуже природний на дотик, Ваші друзі й родичі не відчують нічого незвичного, коли Ви будете їх обіймати.

Інструкція щодо застосування та догляду

Вставками силіконового бюстгальтера поставляється в комплекті по 2 шт. Правий і лівий збільшувач грудей різні за формою. Довгий прямий край – це верх. Зовсім необов'язково купувати новий бюстгальтер. Рекомендується використовувати бюстгальтери та верхні частини купальників з кісточками. Коли Ви підкладаєте збільшувач в бюстгальтер, зона декольте виглядає більш привабливою, а повнота Ваших грудей збільшується. Якщо Ви хочете збільшити груди, не відкриваючи при цьому зону декольте, ми рекомендуємо придбати бюстгальтер, більший на один розмір. Щоб Ваші груди виглядали більшими, достатньо просто помістити WONDER SHAPE на груди в бюстгальтері. Щоб підкреслити зону декольте, помістіть WONDER SHAPE глибше і зсуньте до зовнішнього боку.



Трохи повправлявшись, Ви дуже швидко зрозумієте яким чином найоптимальніше помістити Вставками силіконового бюстгальтера.

Увага!

Лосьйони і креми для засмаги можуть пошкодити оболонку вкладок. Перед застосуванням ретельно очистіть шкіру.

Вставками силіконового бюстгальтера виготовлений зі спеціального силіконового гелю, покритого захисною поліуретановою плівкою. Ця конструкція доволі міцна. Однак її слід захищати від контактів з гострими та колючими предметами.

Вставками силіконового бюстгальтера не можна надягати, якщо оболонка пошкоджена. Якщо поліуретанова оболонка пошкоджена, це місце можна заклеїти текстильною клейкою стрічкою.


Щоб почистити Вставками силіконового бюстгальтера, промийте його водою зі слабким мильним розчином і протріть м'якою серветкою.

Увага: бережіть Вставками силіконового бюстгальтера від дітей. У разі проковтування силіконового гелю негайно зверніться до лікаря.


Гарантійний термін виробу – 24 місяці від моменту покупки. Гарантія поширюється на гандж матеріалу у якості продукту. У якості підтверджуючого документа надається чек. Гарантія дійсна тільки якщо дотримувалася інструкція із застосування. У разі пошкодження в результаті неакуратного поводження з виробом, використання його не за призначенням, недотримання інструкції, гарантія втрачає чинність. Особи, не уповноважені на отримання даних послуг, не обслуговуються.

CZ

Nahore

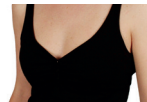

Uprostřed

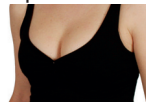

Fantastický způsob zvětšení poprsí, které se i při dotyku chová mimorádně přirozeně.

Tato forma zvětšování prsou byla původně vyvinuta v USA pro filmový a televizní průmysl. Cílem bylo, aby zvětšené poprsí vypadalo při natáčení zblízka co nepřirozeněji. Nikdo, kromě nositelky samotné, by neměl mít ani tušení, že je poprsí zvětšováno! Silikonové vložky podprsenky se vyrábí ze speciálního silikonového gelu, který se používá také pro výrobu prsních implantátů tu. Protože se Silikonové vložky podprsenky pouze vkládá do podprsenky, plavek nebo horního dílu bikin, neexistují zde žádná rizika jako u chirurgického zákroku.

Silikonové vložky podprsenky zvětší vaše poprsí o jednu velikost. Během několika sekund se silikon zahřeje a vaše poprsí bude okamžitě "ve formě".

Protože se WONDER SHAPE chová dokonale přirozeně, nevšimnou si vaši přátelé nebo příbuzní nicoho zvláštního, ani když je obejmou.

Návod k používání a k péči

Silikonové vložky podprsenky se dodávají ve dvou kusech. Levá a pravá vycpávka poprsí má odlišný tvar. Dlouhá rovná hrana je vždy na horní straně. Není vždy nutné kupovat novou podprsenku. Doporučuje se však používat podprsenky, plavky a horní díly bikin s kosticemi. Při vkládání do podprsenky se extrémně zvětší dekolt a plnost poprsí. Pokud chcete zvětšit poprsí, aniž byste zvýrazňovali dekolt, je dobré používat o číslo větší podprsenku. Pro dojem většího poprsí stačí umístit Silikonové vložky podprsenky v podprsence přímo na hrud. Pro zvýraznění dekoltu vkládejte

Silikonové vložky podprsenky hlouběji a poněkud více k vnější straně.

Při vkládání Silikonové vložky podprsenky do podprsenky najdete při troše cvičení velice rychle jejich optimální polohu.

Pozor!

Pletová mléka a prostředky na opalování mohou poškodit fólii vložek do podprsenky. Pokožku před aplikováním pečlivě vycistete.

Silikonové vložky podprsenky je vyroben ze speciálního silikonového gelu a zavazeny do ochranné fólie z polyuretanu. Toto zpracování má velmi dlouhou životnost. Je však třeba je chránit před špičatými a ostrými předměty. Silikonové vložky podprsenky byste neměli nosit, pokud je fólie poškozena. Pokud se fólie z polyuretanu poškodí, lze poškozené místo opravit lepidlem na textil.

Čištění Silikonové vložky podprsenky omýt vodou a mýdlem a poté otřít mekkým ručníkem.

Pozor!

Silikonové vložky podprsenky by se nemely dostat do rukou dětí. V případě požití silikonového gelu přivolejte okamžitě lékařskou pomoc.

Záruka činí 24 měsíců od data koupe a vztahuje se na vady materiálu a kvality. Jako doklad slouží účtenka z nákupu. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud byly dodrženy pokyny z návodu k použití. V případě poškození násilným používáním, zneužitím a neodborným používáním nebo provedením servisu neoprávněnou osobou nárok na záruku zaniká.

Předtím




Předtím




Poté

GB

before

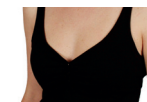

after

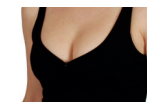

With Silicone breastforms you can increase your cup size and enhance your figure without the risk or cost surgery.

Instructions for use

Directions Place them into your bra, to lift, support & enhance your breasts.

How To Use

Silicone breastforms are completely safe because they are used externally.

Silicone breastforms are so comfortable. They do not require adhesives that can pull, irritate and hurt the skin.

Silicone breastforms mold to fit the shape of your own breasts. You probably will forget you're wearing them.

The natural looking color is perfect to wear even under the lightest, sheerest clothing.

Silicone breastforms fill out your favorite clothes, from sweaters, to bathing suits.

Silicone breastforms can be worn at the beach even in salt water.

Silicone breastforms are Specially designed to have the natural look, feel and softness of real breasts.

Silicone breastforms are designed to bounce and move with your own breast tissue.

above



above



Centre

Attention!

Lotions or tanning agents may damage the film of the bra inserts. Cleanse your skin thoroughly before each application.

Care & Cleaning

Place your Silicone Breast Forms back into its original storage tray when not in use. Clean your Silicone Breast Forms after each time you wear them. Hand wash with cold or warm water with mild soap and pat dry with a soft cloth. Keep away from sharp objects. It can easily puncture unit.

Never place in washing machine, dryer or hot water.

Caution!

Keep out of reach of children. If any part of the product is ingested induce vomiting and consult a physician immediately.

Guarantee: The guarantee lasts for 24 months from the date of purchase for manufacturers' error in material and quality. This guarantee is only valid if the instructions in the "instructions for use" have been followed. The guarantee is no longer valid if the device is damaged due to violent usage, misuse or improper use or service by unqualified persons.

F

Cet article permet un parfait grossissement de la poitrine dont le toucher est exceptionnellement naturel.



A l'origine, cette forme de poitrine a été développée aux USA pour l'industrie de la télévision et du cinéma. Le but initial était que la poitrine grossie paraisse aussi naturelle que possible lors des prises de vue de courte distance. Personne mise à part la personne qui la porte devait savoir que la poitrine était volontairement grossie. Le soutien-gorge avec une poitrine en silicone est produit à partir d'un gel de silicone spécial qui est également utilisé lors de la production des implants dans la poitrine. Étant donné que le soutien-gorge avec une poitrine en silicone n'est utilisé que dans les soutiens-gorge, les bikinis, et maillots de bain, il n'y a aucun risque comparable à ceux d'une chirurgie esthétique. En quelques secondes, le silicone se réchauffe contre votre poitrine et prend la forme souhaitée. Lorsque vous serrez votre partenaire ou vos amis (es) dans vos bras, vous constaterez que personne ne remarque quelque chose d'inhabituel car le soutien-gorge avec une poitrine en silicone a un toucher vraiment naturel.


Mode d'emploi et conseils d'utilisation:

Le soutien-gorge avec une poitrine en silicone est livré à la paire. Le côté gauche et le côté droit sont formés de façon différente. Le bord le plus long représente le dessus de la poitrine. Le soutien-gorge avec une poitrine en silicone agrandit la poitrine d'une taille supérieure à votre soutien-gorge habituel. Il n'est absolument pas nécessaire de changer de soutien-gorge mais nous vous conseillons de prendre des soutiens-gorge, des hauts de bikini ou maillots de bain avec armatures. Lorsque vous les disposerez dans le soutien-gorge, vous obtiendrez un beau décolleté et votre poitrine semblera mieux pourvue. Si vous souhaitez grossir votre poitrine sans avoir un décolleté trop débordant, veuillez utiliser une taille de soutien-gorge supérieure. Pour faire ressortir une poitrine plus forte, placez directement les Le soutien-gorge avec une poitrine en silicone sur la poitrine. Pour mettre votre décolleté en évidence, posez les Le soutien-gorge avec une poitrine en silicone plus bas et un peu plus sur les côtés extérieurs.

Vous vous habituerez assez rapidement à bien placer les soutiens-gorge avec une poitrine en silicone au fur et à mesure de leurs utilisations.

Attention!

Les lotions ou produits bronzants peuvent endommager la feuille composant les garnitures pour soutien-gorge.

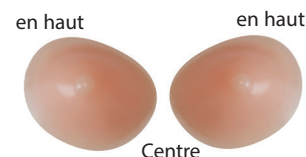

Nettoyez-vous soigneusement la peau avant l'application. Le soutien-gorge avec une poitrine en silicone est produit à partir d'un gel de silicone spécial recouvert d'un film protecteur en polyuréthane. La couverture est solide, il faut malgré tout faire attention à ne pas les mettre à proximité d'objets pointus et saillants. Vous ne devez pas porter de Le soutien-gorge avec une poitrine en silicone lorsque le film protecteur est endommagé. Si le film protecteur en polyuréthane est défectueux, vous pouvez le refermer à l'aide d'une bande autocollante pour textile.

Pour nettoyer les Le soutien-gorge avec une poitrine en silicone il suffit de les laver avec de l'eau et du savon doux et de les essuyer avec un linge doux.

Attention:

Ne pas mettre à la portée des enfants. 0, Si le gel de silicone est ingéré, veuillez consulter directement un docteur.

Garantie: la garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat et comprend les défauts de fabrication (matériau et qualité). La présente garantie n'est valide que si les consignes figurant dans la notice d'emploi ont été respectées. La garantie sera annulée en cas de dommages résultant d'une utilisation de l'appareil avec force, d'un mauvais usage, d'une utilisation non appropriée et de réparations effectuées par des personnes non habilitées.

S

Silikon bh skär är en fantastisk bröstförstoring, som känns äkta även vid beröring.



Ursprungligen utvecklades denna typ av bröstförstoring för film- och TV-industrin i USA. Målet var att de förstörade brösterna skulle se så äkta ut som möjligt i närbild. Ingen, förutom bäraren själv, skulle veta att brösterna var förstörade! Silikon bh skär tillverkas av en speciell silkongelé, som även används vid tillverkning av bröstimplantat. Eftersom Silikon bh skär bara läggs in i BH:n, baddräkten eller bikiniöverdelen, finns det inte några risker som det finns vid kirurgiska ingrepp.

Silikon bh skär förstör dina bröst en BH-storlek. Inom några sekunder värms silikonet upp. Dina bröst hittar snabbt "formen". Eftersom Silikon bh skär känns extremt naturliga, kommer dina vänner och bekanta inte att märka något konstigt, när du omfamnar dem.

Bruksanvisning och skötselråd

Silikon bh skär levereras i par. Den vänstra och den högra bröstförstoringen har olika form. Den långa, raka kanten är alltid ovsidan. Det är inte nödvändigt att köpa nya BH:ar. Det rekommenderas dock att du använder BH:ar, baddräkt och bikiniöverdel med bygel. Inlägget i BH:n förstärker dekolletaget och fyllnaden på brösterna avsevärt. Om du vill förstora brösterna utan att markera dekolletaget, är det klokt att köpa en BH med en storlek större. För att brösterna ska se större ut, räcker det att placera Silikon bh skär direkt på brösterna i BH:n. För att markera dekolletaget, lägger du silikon bh skär lite djupare och mer på den yttre sidan.

Att lägga i Silikon bh skär i BH: n bli lättare efter lite övning, och du hittar sedan snabbt den optimala placeringen.



Varning!

Lotion och brunkräm kan skada filmen på BH-inläggen. Rengör huden noggrant före användning.

Silikon bh skär har tillverkats av en särskild silkongelé och har förseglats i en skyddsfilm av polyuretan. Denna bearbetning är mycket slitstark. De ska dock hållas borta från skarpa och spetsiga föremål.

Bär inte Silikon bh skär om filmen är skadad. Om filmen av polyuretan är skadad, kan du tillsluta det skadade stället med en textiltjip. För rengöring av silikon bh skär, tvätta med vatten och en mild tvål och torka sedan med en mjuk trasa.



Varning:

Silikon bh skär ska hållas borta från barn. Om en person har svält silkongelét, kontakta genast läkare.

Garnatin löper på 24 månader från inköpsdatumet för tillverkningsfel i material och kvalitet. Inköpskvittot gäller som bevis. Denna garanti gäller endast, om informationen i bruksanvisningen har följts. Vid skador p.g.a. bruk av våld, missbruk och felaktig användning eller service av icke-kvalificerade personer gäller inte längre garantin.

P

Enchimento de silicone para soutien permite um fantástico aumento dos seios, que proporciona, também ao contacto, uma sensação extraordinariamente natural.

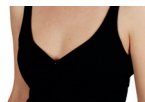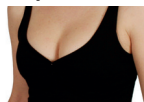antes**depois**

Esta forma de aumento dos seios foi desenvolvida para a indústria cinematográfica e de televisão nos E.U.A. e tinha como objectivo proporcionar um aumento dos seios que parecesse tão natural quanto possível em imagens a curta distância. Ninguém, para além da pessoa que o usava, deveria notar que os seios tinham sido aumentados!

Enchimento de silicone para soutien parece extremamente natural, os seus amigos e familiares não irão notar nada de anormal, ao abraçá-la. Enchimento de silicone para soutien é feito de um gel de silicone especial, que também é utilizado no fabrico de próteses para os seios.

Modo de utilização

Enchimento de silicone para soutien pode sair do sítio?

A silicone aquece em segundos. Por esta razão, ajusta-se rapidamente à temperatura do corpo e à forma dos seios. Pode colocar enchimento de silicone para soutien dentro do soutien, no biquíni ou fato de banho. O biquíni, o fato de banho ou o soutien devem, no entanto, ter armação. Ao colocá-lo no soutien, o decote e a opulência dos seios aumentam extremamente. Se pretende aumentar os seios, sem acentuar o decote, é conveniente utilizar um soutien com o tamanho acima. Para que os seios pareçam maiores, basta aplicar o Enchimento de silicone para soutien no soutien, directamente sobre os seios.

Para realçar o decote, coloque enchimento de silicone para soutien mais em baixo e mais para o exterior. Com um pouco mais de prática ao colocar o Enchimento de silicone para soutien, irá encontrar muito rapidamente a posição ideal no soutien para si.

Quanto tempo dura enchimento de silicone para soutien?

O Enchimento de silicone para soutien é soldado numa película de protecção de poliuretano. Este processo é muito resistente.

No entanto, tem que ser mantido afastado de objectos aguçados e afiados. Se a película de poliuretano se rasgar, a parte danificada pode ser vedada com uma fita adesiva para uso têxtil.

Não deve utilizar o Enchimento de silicone para soutien se a película estiver danificada.

Como se lava enchimento de silicone para soutien?

Após a utilização, lave com água e sabão suave e seque em seguida com um pano macio.

Atenção:



Enchimento de silicone para soutien deve ser mantido fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão do gel de silicone, consulte imediatamente um médico.

Garantia:

A garantia é de 24 meses a partir da data de compra sobre defeitos de fabricação no material e na qualidade. Essa garantia somente é válida quando forem observadas as orientações das instruções de uso. Em caso de danos por aplicação de força, abuso ou emprego inadequado ou ainda assistência técnica por pessoas não autorizadas a garantia extingue-se.

cima**cima****meio****NL**

Een fantastische borstvergroting die ook bij aanraken buitengewoon echt aanvoelt.

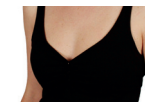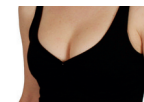voor**daarna**

Oorspronkelijk is deze vorm van borstvergroting ontwikkeld voor de film- en TV-industrie in de V.S. Het doel van deze ontwikkeling was, de vergrote borst bij een close-up opname er zo echt mogelijk uit te laten zien. Niemand behalve de draagster zelf hoefde te weten dat de borst kunstmatig was vergroot! Silicone BH-inlegstukken is gemaakt van speciaal silicone-gel dat ook wordt gebruikt bij het vervaardigen van borstimplantaten. Omdat Silicone BH-inlegstukken alleen maar in BH, badpak of bikini wordt gelegd, bestaat er geen enkel risico zoals dit bij een chirurgische ingreep het geval is. Silicone BH-inlegstukken maakt uw borstomvang met één BH-maat groter. De silicone wordt binnen enkele seconden warm door de lichaamstemperatuur. Daardoor is uw borst direct „in vorm“. Omdat Silicone BH-inlegstukken extreem natuurlijk aanvoelt zullen vrienden of familie er bij omhelzingen niets van merken.

Gebruiksaanwijzing en onderhoudswenken

Silicone BH-inlegstukken is verkrijgbaar per paar. Het linker en rechter inlegschuifje is verschillend gevormd. De lange rechte kant is de bovenkant. Silicone BH-inlegstukken maakt uw borst met één BH-maat groter. Het is echter niet per sé nodig nieuwe BH's te kopen. Het is wel aan te bevelen om BH's, badpakken of bikini's met beugel te kopen. Wanneer men de vulling in de BH legt, worden het decolleté en de ronding van de borst extreem versterkt. Wanneer u uw borst wilt vergroten zonder het decolleté al te zeer te accentueren is het raadzaam om een één maat grotere BH te gebruiken. Om de borst er groter uit te laten zien is het voldoende de Silicone BH-inlegstukken direct op de borst in de BH te leggen. Om het decolleté sterker te accentueren brengt u de Silicone BH-inlegstukken wat dieper aan en wat meer naar de buitenkant toe.

U zult bij het inzetten van de Silicone BH-inlegstukken in de BH al snel vaststellen wat de optimale positie van het opvulstuk is.

Attentie!

Lotions of bruiningsmiddelen kunnen de folie van de BH-inlegstukken beschadigen. A.u.b. de huid voor het gebruik zorgvuldig reinigen.

Boven**Boven****Midden**

Silicone BH-inlegstukken is gemaakt van een speciaal siliconen-gel en is ingepakt in een beschermende folie van polyuretaan. Deze combinatie is zeer houdbaar. Men moet er echter wel voor zorgen dat het materiaal niet in aanraking komt met scherpe punten en kanten. Silicone BH-inlegstukken mag niet worden gedragen, wanneer de beschermende folie is beschadigd. Indien de folie van polyuretaan is beschadigd kan de beschadiging worden gerepareerd met textielpakband.

Maak de Silicone BH-inlegstukken schoon met water en een milde zeepsoort en droog hem vervolgens af met een zachte doek.

Opgelet:

Houd Silicone BH-inlegstukken buiten het bereik van kinderhanden. Wanneer iemand silicone-gel heeft ingeslikt moet direct een arts worden geraadpleegd.

Garantie:

De waarborg bedraagt 24 maanden vanaf de verkoopsdatum op fabricagefouten die materiaal en kwaliteit betreffen. Deze waarborg is enkel geldig indien rekening werd gehouden met de gebruiksaanwijzingen. Bij beschadiging door gebruikmaking van geweld, misbruik en ondeskundig gebruik of door reparatuur door onbevoegde personen wordt de garantie ongeldig.


I

Sostegno di silicone per reggiseno dà volume al seno in modo eccezionale ed anche al tatto sembra straordinariamente autentico.

prima



dopo

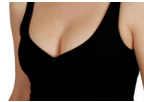

Questo modo di ingrandire il seno è stato sviluppato inizialmente negli Stati Uniti per l'industria cinematografica e televisiva. Lo scopo era quello di far apparire il seno ingrandito il più autentico possibile anche durante i primi piani. Nessuno doveva capire che il seno era stato ingrandito, fatta eccezione per colei che lo indossava, naturalmente!

Sostegno di silicone per reggiseno è prodotto con uno speciale gel al silicone che viene usato anche per la produzione degli impianti per seno. Sostegno di silicone per reggiseno non è assolutamente rischioso come un'operazione chirurgica, per il semplice fatto che viene inserito solamente nei reggiseno, nei costumi da bagno o nei reggiseno del bikini. Sostegno di silicone per reggiseno è in grado di ingrandire il Vostro seno di una taglia. Nel giro di pochi secondi, infatti, il silicone si riscalda ed il Vostro seno è subito "in forma". E quando i Vostri amici o parenti Vi abbracceranno non noteranno nulla di insolito, perché Sostegno di silicone per reggiseno è estremamente naturale al tatto.

Istruzioni per l'Uso e per la Manutenzione

Ogni fornitura comprende una coppia di Sostegno di silicone per reggiseno. La coppa destra e quella sinistra vengono modellate in modo differente. Il bordo lungo e dritto è sempre quello superiore. Benché Sostegno di silicone per reggiseno ingrandisca il seno di una taglia, non si è assolutamente costretti ad acquistare nuovi reggiseno. Tuttavia si consiglia di usarlo quando si indossano reggiseno, costumi da bagno o reggiseno del bikini a forma a balconcino. Inserendolo nel reggiseno si accentua enormemente il décolleté ed il volume del seno. Se desiderate ingrandire il seno, senza mettere in evidenza il décolleté, allora è preferibile usare un reggiseno, che sia più grande di una taglia. Per far apparire il seno più grande, basta sistemare Sostegno di silicone per reggiseno direttamente sul seno all'interno del reggiseno. Per accentuare il décolleté, invece, bisogna sistemare Sostegno di silicone per reggiseno più in basso e verso il lato esterno.

Esercitando Vi ad inserire sostegno di silicone per reggiseno nel reggiseno imparerete immediatamente qual è la Vostra posizione preferita.

Attenzione!

Lozioni o prodotti abbronzanti possono danneggiare la pellicola di plastica dell'inserto del reggiseno. Pulire attentamente la pelle prima dell'applicazione.

Sostegno di silicone per reggiseno è prodotto con uno speciale gel al silicone e sigillato con una pellicola protettiva di poliuretano. Questa lavorazione lo rende particolarmente resistente, tuttavia è consigliabile evitare il contatto con oggetti acuminati e taglienti. Sostegno di silicone per reggiseno non va indossato nel caso in cui la pellicola di poliuretano sia danneggiata. Nel caso in cui la pellicola di poliuretano risulti danneggiata in qualche parte, la si può facilmente riparare, sigillando la parte danneggiata con del nastro adesivo in tessuto. La pulizia di Sostegno di silicone per reggiseno si effettua lavandolo con acqua ed un sapone delicato, subito dopo va asciugato strofinandolo con un panno morbido.

Attenzione:

Sostegno di silicone per reggiseno va tenuto fuori della portata dei bambini. Nel caso di ingestione del gel al silicone, consultare immediatamente un medico.

Garanzia: La garanzia corrisponde a 24 mesi dalla data di acquisto su difetti di produzione del materiale e della qualità. La presente garanzia vale esclusivamente se le istruzioni per l'uso vengono rispettate e decade in caso di danni causati da un uso o una manutenzione arbitrari, impropri o scorretti da parte di persone non autorizzate.


E

Refuerzo de silicona para el sujetador es un artículo fantástico para agrandar sus pechos que, al tacto, resulta muy natural.

antes de



más tarde

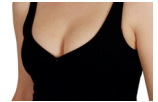

En su origen, este método fue ideado para la industria del cine y de la televisión en los Estados Unidos. La finalidad era que el pecho agrandado apareciera en los primeros planos lo más natural posible. ¡Nadie, exceptuando a la persona que lo llevaba, debía saber que el pecho había sido agrandado! Como Refuerzo de silicona para el sujetador es muy natural, sus amigos y familiares no notarán nada especial cuando le abracen. Refuerzo de silicona para el sujetador está elaborado con un gel de silicona especial, utilizado así mismo en la fabricación del material para las implantaciones en el pecho. Al contrario que en los casos de intervenciones quirúrgicas, con Refuerzo de silicona para el sujetador no existe riesgo alguno. Refuerzo de silicona para el sujetador agranda sus pechos una talla de sujetador. Refuerzo de silicona para el sujetador se entrega de dos en dos. La forma de los refuerzos izquierdo y derecho es diferente. El borde largo corresponde a la parte de arriba

¿Puede refuerzo de silicona para el sujetador moverse de lugar?

La silicona se calienta en segundos, adaptándose rápidamente a la temperatura de su cuerpo y a la forma del pecho. Puede colocar Refuerzo de silicona para el sujetador en el sujetador o también en la parte superior de su bikini o bañador. Sin embargo es muy aconsejable que dichas prendas o bien el sujetador lleven aros. Al colocarse en el sujetador, el escote y el contorno del pecho se ven extremadamente realzados. Si desea agrandar el pecho sin realzar el escote se recomienda usar un sujetador de una talla superior. Para que el pecho se vea agrandado, basta con colocar el refuerzo de silicona para el sujetador directamente en el pecho. Para resaltar el escote coloque el Refuerzo de silicona para el sujetador más hacia abajo y un poco más hacia la parte exterior.

Cuando coloque el Refuerzo de silicona para el sujetador en el sujetador, encontrará rápidamente con un poco de práctica la posición que le resulte más idónea

¡Atención!

Las lociones o los bronceadores pueden dañar la hoja de los rellenos para sostén. Límpiense bien la piel antes de la aplicación.

¿Cuánto tiempo dura un refuerzo de silicona para el sujetador?

Refuerzo de silicona para el sujetador está recubierto por una capa de poliuretano. Este sistema es muy duradero. Sin embargo, se debe mantener alejado de objetos afilados y punzantes. En caso de que dicha capa resultase dañada, se podrá tapar la zona en cuestión con una cinta adhesiva de tela. No use refuerzo de silicona para el sujetador en caso de que las capas estén dañadas.

¿Cómo puedo limpiar el refuerzo de silicona para el sujetador?

Después de su uso, lávelo con agua y jabón suave y, a continuación, séquelo con un paño suave.

Atención:

Refuerzo de silicona para el sujetador debe mantenerse fuera del alcance de los niños. En caso de que se ingiera el gel de silicona consulte inmediatamente con su médico.

Garantía: El aparato tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra en cuanto a errores de fabricación de materiales y de calidad. Esta garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso. En caso de producirse daños por uso de violencia, mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.

